

SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ TEDAVİSİ UYGULAMA REHBERİ



Baxter

İÇİNDEKİLER

Ön Söz.....	2
Diyaliz İşlemi Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar.....	3
Diyaliz İşlemi Ortamında Bulunan Kişiler Nasıl Olmalıdır?.....	4
Diyaliz İşlemi Öncesi Hazırlık.....	6
Diyaliz İşleminde Kullanılacak Malzemeler.....	7
Diyaliz İşlemine Başlangıç Aşaması.....	8
Solüsyon Torbasının Kontrol Edilmesi ve Hazırlanması.....	10
Diyaliz İşlemine Bağlanma Aşaması.....	12
Diyaliz İşleminde Boşaltım Aşaması.....	13
Diyaliz İşleminde Setlerin Havaasının Çıkarılması Aşaması.....	14
Diyaliz İşleminde Dolum Aşaması.....	15
Diyaliz İşleminden Ayrılma Aşaması.....	16
Son Söz.....	20
Notlar.....	21

Ön Söz

*Bu kitapçıkta, Sürekli Ayaktan Periton
Diyalizi (SAPD) tedavisinin uygulama
adımları ve dikkat edilmesi gereken
hususlar anlatılmıştır.*

Sağlığınız bizim için değerlidir.

Diyaliz İşlemi Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar

- Diyaliz işlemine başlamadan önce uygun diyaliz ortamı hazırlanmalıdır.
- Diyaliz işlemine başlamadan önce eller yıkanmalıdır.
- Diyaliz işlemi için ayrılmış oda temizlenmiş ve havalandırılmış olmalı ve odada kullanılmayan, toz tutacak eşyalar bulundurulmamalıdır.
- Diyaliz işlemi için gerekli malzemeler hazır olmalıdır.
- Diyaliz işlemi sırasında odada hasta ve gerekiyorsa yardımcısı/bakıcısı dışında kimse bulunmamalıdır.
- Diyaliz işlemi süresi boyunca kapı ve pencere kapalı olmalı, klima çalıştırılmamalıdır.

Diyaliz İşlemi Ortamında Bulunan Kişiler Nasıl Olmalıdır?



Rahat ve temiz giysiler giyilmelidir.




Eldeki takılar (yüzük, saat, bilezik vs) çıkarılmalıdır.



Tırnaklar kısa ve temiz olmalıdır.



Saçlar uzunsa toplanmalıdır.

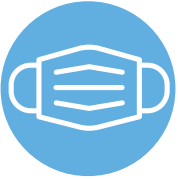

Maske kullanılmalıdır.
(Eğer yardımcı/bakıcı ile işlem yapılıyorsa mutlaka o kişi de maske takmalıdır)

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Notunuz Var!

- Periton diyalizi tedavisinde periton diyaliz solüsyonları kullanılır.
- Glukoz (şeker) içerikli solüsyonlar temel solüsyonlardır, her torba değişimi için kullanılabilirler.
- Bazı periton diyaliz solüsyonlarında, glukoz yerine başka etken maddeler kullanılabilir. Bunlar günde yalnız bir kez, glukozlu olan solüsyonun yerine kullanılır.

Diyaliz İşlemi Öncesi Hazırlık

- Diyaliz işlemine başlamadan önce kullanılacak solüsyon kontrol edilir.
- Diyaliz solüsyonunun *-toplam 5 maddeye göre-* kontrolü yapılır.
 1. Sıvı miktarı
 2. Solüsyonun glukoz içeriği (kapak rengi kontrolü)
 3. Son kullanma tarihi
 4. İçinde yabancı cisim olup olmadığı ve berraklığı
 5. Torbada delik ve sızıntı olup olmadığı
- Kontrol edilmiş solüsyon ısıtıcı çantaya koyularak vücut ısısına yakın hale gelinceye kadar ısıtılır. Mikrodalga ya da başka ısı kaynakları kullanılmaz.
- İşlem sırasında kullanılacak solüsyon askısının boyu ve yeri ayarlanır.

Diyaliz İşleminde Kullanılacak Malzemeler

1



- Isıtılmış diyaliz solüsyonu
- Maske
- 2 adet mini kapak
- 2 adet mavi klemp
- Tartı
- Istıcı çanta
- Kağıt havlu
- Askı
- Antiseptik solüsyon

Diyaliz İşlemine Başlangıç Aşaması-1

2



Eller yıkanır.

3



Malzemelerin koyulacağı masaya antiseptik solüsyon dökülür, sonrasında kağıt havlu ile silinir.

Her bir malzeme kullanım sırasına göre uzaktan yakına doğru ve antiseptik solüsyon ile silinerek masanın üzerine yerleştirilir.

Diyaliz İşlemine Başlangıç Aşaması-2

4



Diyaliz solüsyon torbası, diyaliz işleminin yapılması için silinmiş masanın dışında başka temiz bir alanda açılır.

Açmak için torbanın alt ve üst kenarlarında bulunan ayrımlardan faydalanılır.

5



Maske takılır.

Kateter kıyafet dışına çıkarılarak hazırlanır.

6



Eller antibakteriyel sıvı sabun ile 2 dk süresince yıkanır.

Solüsyon Torbasının Kontrol Edilmesi ve Hazırlanması

7



Diyaliz solüsyonu torbanın dış kılıfına dokunulmadan alınır ve temizlenmiş masaya yerleştirilir.

Solüsyonda sızıntı olup olmadığı, berraklığı ve glukoz içeriği (kapak rengi) kontrolü tekrar yapılır.

Solüsyon ve set bağlantılarında bükülme veya yapışıklık olup olmadığı, kontrol edilir.

Solüsyonun bölmeleri arasında bulunan yeşil güvenlik kapsülü kırılır (*yeşil kapsül önce sağa sonra sola çevrilerek 'çıt' sesi duyulduğunda kırılmış olacaktır*).

Diyaliz İşlemine Başlangıç Aşaması-3

8



Diyaliz solüsyonu setler aşağıda kalacak şekilde asılır.

Solüsyonun dolu kısmı iki bölmeden oluşuyorsa daha önce kırılmış olan yeşil güvenlik kapsülünün açılması ile iki ayrı bölmede olan solüsyonlar birbirine karışacaktır.

İki bölmedeki solüsyonun karışması için 2-3 dk beklenir.


İki bölümdeki solüsyon birbirine karıştıktan sonra bu aşamada diyaliz solüsyonuna ilaç uygulama bölmesinden ilaç uygulanabilir.

9



Boşaltım torbası parlak yüzü üste gelecek şekilde yere bırakılır.

10

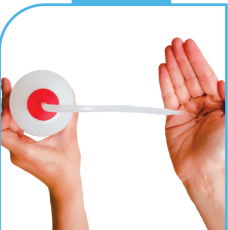

Ellere antiseptik solüsyon dökülür ve kuruması beklenir.

Diyaliz İşlemine Bağlanma Aşaması

11



Solüsyon ve set bağlantısı yapılır.



Solüsyon setinin ucundaki renkli çekme halkası çıkarılır.

12



Kateterin ucundaki mini kapak çıkarılır. Solüsyon seti ile kateterin ucu birbirine vidalama tekniği ile bağlanır.


Diyaliz İşleminde Boşaltım Aşaması

13




Kateterin üzerindeki döner başlıklı beyaz klemp çevrilerek açılır ve karındaki sıvının boşaltım torbasına akması beklenir.

14

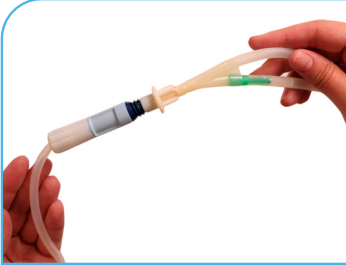

Boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra döner başlıklı beyaz klemp kapatılır.

15

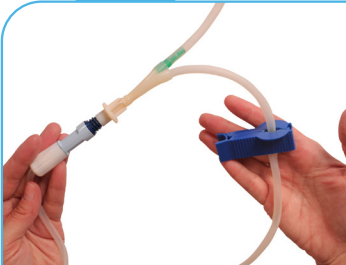


Boşaltım torbasının hattına mavi klemp yerleştirilir (çıt sesi duyulur).

Diyaliz İşleminde Setlerin Havasının Çıkarılması Aşaması

16




Katetere bağlı setin üzerinde bulunan yeşil güvenlik kapsülü kırılır (çıt sesi gelecektir).

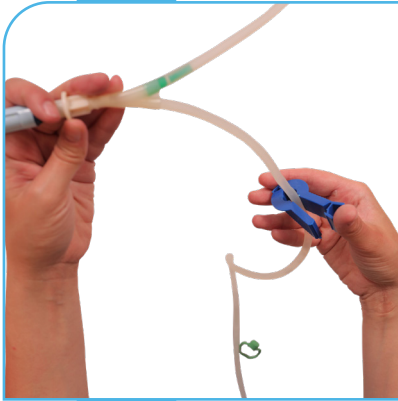

Boşaltım torbasının hattındaki mavi klemp açılır ve 10'a kadar sayılarak beklenir (bu aşamada solüsyonun setinde hava varsa çıkmış ve setler yıkanmış olacaktır) ve boşaltım hattındaki mavi klemp tekrar kapatılır.


Diyaliz İşleminde Dolum Aşaması

17

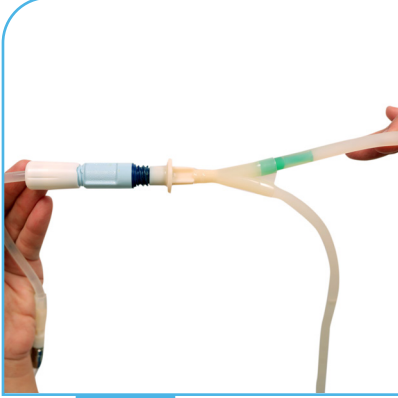

Kateterin ucundaki döner başlıklı beyaz klemp açılır ve önerilen miktardaki solüsyon karın içine doluncaya kadar beklenir.

18

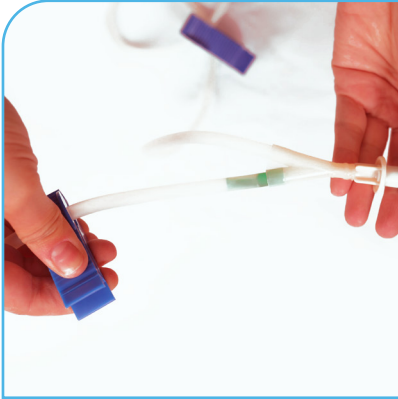

Solüsyon karın içine dolduktan sonra kateterin üzerindeki döner başlıklı beyaz klemp kapatılır, ikinci mavi klemp askıda olan solüsyonun hattına takılır (çıt sesi duyulur).


Diyaliz İşleminde Ayrılma Aşaması-1

19



Yeni mini kapağın paketi dikkatli bir şekilde açılır.

20

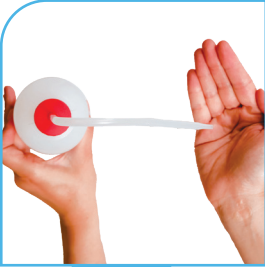

Ellere antiseptik solüsyon dökülür ve kuruması beklenir.

21



Solüsyon torbası ve kateterin bağlantısı ayrılır.



Kateterin ucuna dikkatli bir şekilde yeni mini kapak takılır.

Diyaliz İşleminde Ayrılma Aşaması-2

22



Boşaltılan sıvı tartılır.

23



Boşaltılan sıvının;

- Rengi,
- Berraklığı,
- Fibrin olup olmadığı, kontrol edilir.

Diyaliz İşleminde Ayrılma Aşaması-3

24



Tüm Tedavi Bilgileri SAPD Kayıt Defterine Kayıt Edilir.

- Kilo
- Tansiyon
- Diyaliz solüsyonunun glukoz içeriği
- Dolum miktarı
- Boşaltım miktarı
- Fazla boşaltılan sıvı (UF) miktarı

Diyaliz İşleminde Ayrılma Aşaması-4

25



Tüm tedavi bitince, tek kullanımlık olan kullanılmış solüsyon torbaları imha edilir.

Eller yıkanır ve diyaliz odası temizlenir.

Son Söz

Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz işlemi sırasında hijyen kurallarına özen göstermek önemlidir.

İşlemin prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmesi, ileride karşılaşılabilecek sorunları önler, tedavi süreci daha etkili ve kolay devam eder.

***Detaylı bilgi için web
adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.adimadimdiyaliz.com***

Notlar

Baxter

www.adimadimdiyaliz.com

TURZ/MG2/20-0041

Baxter Türkiye Renal Hizmetleri A.Ş Dereboyu Caddesi Bilim Sokak No:5
Sun Plaza. K:24-25/ Maslak, İstanbul/Türkiye

T: 0212 365 5300

www.baxter.com.tr